

Absorbest BioShield®

Absorbest BioShield är ett sterilt, följsamt och superabsorberande förband för vätskande sår. Absorbest BioShield absorberar och behåller vätskan inuti förbandet. Sårexsudat absorberas vertikalt i förbandet och förvandlas till en gel, vilket minskar risken för maceration samtidigt som en fuktig sår läkningsmiljö bibehålls. Absorbest BioShield förblir torrt och bekvämt för patienten.

Förbandet har ett vitt sårkontaktlager som placeras mot såret, och som hjälper till att bevara fukt och stödjer en gynnsam sår läkningsmiljö.¹

Sårkontaktlagret har en biofilmsförebyggande effekt som motverkar tillväxt av biofilm på förbandet och i dess omedelbara närhet.^{1,2} Den biofilmsförebyggande funktionen bygger på en mekanism som inte frisätter antimikrobiella substanser eller dödar bakterierna.¹ Förbandet hanterar effektivt sårsvätska som innehåller både bakterier och svamp.¹ Den vita ytan transporterar effektivt bort vätska från såret och fördelar den jämnt i förbandets kärna som är uppbyggd av DryMax technology core. Förbandet har en grön hydrofob baksida för att minska risken för genomslag av sårsvätska. Förbandets tunna och mjuka egenskaper gör att det passar på alla platser på kroppen. Det sömlösa sårkontaktlagret förenklar placeringen över såret. Absorbest BioShield är utvecklad för att fungera väl tillsammans med kompressionsbehandling.

Applikationsguide




Artikel	Förbandsstl i cm	REF	Antal per fp	Absorptionskapacitet*
Absorbest BioShield	5x5	F60910/10	10	20 ml
Absorbest BioShield	7.5x7.5	F60911/10	10	60 ml
Absorbest BioShield	10x10	F60913/10	10	125 ml
Absorbest BioShield	10x20	F60915/10	10	310 ml
Absorbest BioShield	15x20	F60914/10	10	400 ml
Absorbest BioShield	20x20	F60916/10	10	600 ml
Absorbest BioShield	20x30	F60917/10	10	910 ml

*Free swell absorption capacity according to EN 13726:2023

1) In vitro data on file

2) Preclinical porcine wound model data on file

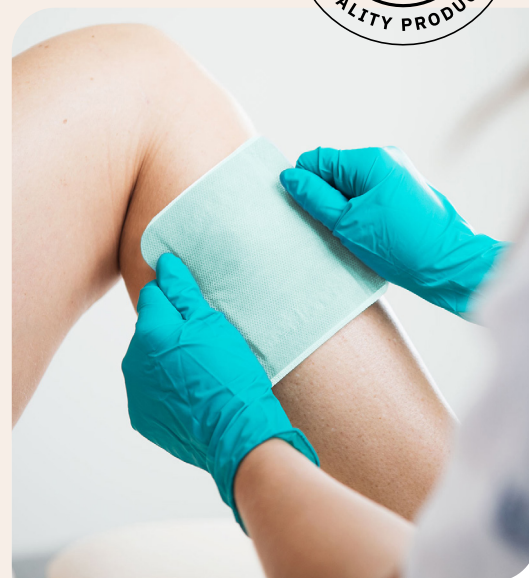

- Biofilmsförebyggande effekt
- Utan antimikrobiella substanser
- Effekt mot både bakterier och svamp i sårsvätska
- Stödjer AMS

